

INSTRUCCIONES DE USO

EQUIPO BTI APNiA



RECUERDE RELLENAR EL CUESTIONARIO ADJUNTO CON LOS DATOS PERSONALES (NOMBRE, ALTURA Y PESO) Y HORA APROXIMADA DE DORMIR Y DE DESPERTARSE.

1

COLOCACIÓN DEL EQUIPO:

- 1.1 Ajuste el equipo al tórax dejándolo en la parte frontal. Si desea hacer uso del enganche opcional introduzca la cinta en él y colóquelo en el lado derecho del equipo. Si no desea utilizarlo, enganche la cinta directamente en el extremo derecho del dispositivo.



HOMBRES: Coloque el dispositivo en el centro del tórax.

MUJERES: Coloque el dispositivo bajo el pecho.

CÁNULA NASAL

- 1.2 Inserte la cánula en la nariz, pase los tubos por detrás de las orejas y ajuste el pasador por debajo de la barbilla sin que quede muy justo ni muy apretado. Fije la posición de la cánula con esparadrapo, para evitar que se mueva durante la noche.




- Inserte el sensor en el equipo

IMPORTANTE: La cánula debe insertarse con los dos pequeños tubos mirando hacia la nariz, no hacia arriba, si son **demasiado** molestos se pueden cortar **con mucho cuidado** de respetar la forma con una tijera.

PULSIOXÍMETRO

- 1.3 Colocarse el sensor de oximetría en el dedo. Preferentemente se aconseja poner el sensor en la mano no dominante (si eres diestro en la izquierda y viceversa) y en el dedo corazón, índice o anular.

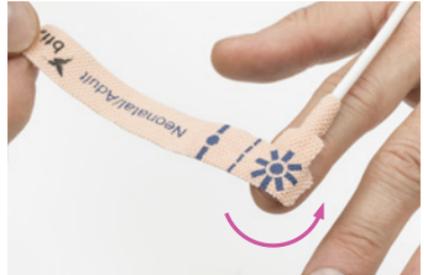

Enrolle el sensor restante alrededor del dedo, de tal forma que la parte inferior del sensor (**1 punto y 2 rayas**) quede pegada en la parte inferior del dedo. Debe quedar firme y **sin excesiva compresión**, posado no apretado, si se aprieta demasiado molestará a lo largo de la noche.



- Inserte el sensor en el equipo

2

ENCENDIDO DEL EQUIPO JUSTO ANTES DE DORMIR:

- **Pulse continuamente el botón ① durante 1 segundo hasta oír un pitido corto**, las luces se encenderán y comenzará la grabación. La luz del sensor del dedo se encenderá.



En caso de que esté de color amarillo compruebe que los sensores están correctamente conectados



Una vez encendido debe de estar el **primer minuto sentado y quieto** con el dispositivo conectado para la recogida de **parametros basales**.

3

GRABANDO:

- En los primeros 3 minutos, las luces del equipo permanecerán encendidas. Después se apagarán para evitar el excesivo consumo.



Si el paciente en cualquier momento desea verificar que el equipo sigue funcionando, comprobar que la luz del sensor del pulsioxímetro del dedo está encendida, durante toda la noche.

4

APAGADO DE EQUIPO, RECOGIDA Y ENTREGA DEL BTI APNIA

- Para detener la grabación hay que **pulsar continuamente el botón** ① **hasta escuchar un pitido** (unos 5 segundos aproximadamente).



aprox.

- Retire las conexiones de los sensores y guarde el equipo junto con el cinturón y el enganche opcional tal y como lo recibió.



La cánula nasal y el pulsioxímetro son desechables.
Entérgelos al personal sanitario para su eliminación.



BTI APP
NUEVOS PRODUCTOS

Versión iPhone / smartphone

Versión iPad / Tablets (Área cliente)